


# ImPath RETRIEVAL SOLUTION PH6.0



## Productbeschikbaarheid

Cat. Nr. 44998

Inhoud 100 Testen

 PathCom Systems, Inc.  
6759 Sierra Ct. Ste# B  
Dublin, CA 94568

## Beoogd gebruik

Voor in vitro diagnostisch gebruik.

Rev: 090514B

## Beschrijving

ImPath retrieval solution pH6.0 is bedoeld voor Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) op formaline-gefixeerde, paraffine-ingebbede weefselcoupes als onderdeel van een immunohistochemische procedure. HIER met gebruik van een speciale pH oplossing verbetert de kleuring van sommige antilichamen door blootlegging van epitopen in weefsel dat tijdens fixatie verborgen is. ImPath retrieval solution pH6.0 is bedoeld voor gebruik in immunohistochemie in combinatie met de ImPath 36. De optimale omstandigheden voor epitope retrieval moeten door de gebruiker bevestigd worden, omdat deze afhankelijk zijn van weefsel, fixatie en/of primair antilichaam.

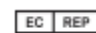
## Gedistribueerd door:

A.Menarini Diagnostics S.r.l.  
Via Sette Santi, 3  
50131 Firenze  
Italy

## Samenvatting en uitleg

IHC (immunohistochemie) is een veel gebruikte techniek die de identificatie van antigenen die aanwezig zijn op weefsel of cellen ondersteunt.

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om de beste werkomstandigheden en de beste reagentia voor het uitvoeren van de kleuring-run te bepalen.

 A.M. Bertolini  
Via Gorizia 50  
23900 Lecco  
Italy



## Verschafte reagentia

Onderdeel	Aantal per kit
Retrieval oplossing pH 6,0	4 (vier)

# ImPath RETRIEVAL SOLUTION PH6.0



## Verdunning en mengen

Het product is gebruiksklaar. Het aantal testen is geprogrammeerd met RFID op elke flacon. Geen verdere verdunning vereist.

## Opslag en stabiliteit

Bewaren op 2-8°C. Niet invriezen. De reagentia moeten onmiddellijk na gebruik weer worden teruggebracht op de hierboven vermelde bewaarcondities. Indien op de juiste wijze opgeslagen, blijven de reagentia tot de op het etiket aangegeven datum stabiel.

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

ImPath oplossingen zijn schadelijk en irriterend voor de ogen, luchtwegen en huid. De oplossingen kunnen na inslikken schade aan longen en maag veroorzaken. **Draag wegwerphandschoenen bij het hanteren van reagentia.** Veiligheidsinformatiebladen zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw plaatselijke vertegenwoordiger. Er worden geen expliciete of impliciete garanties buiten het bereik van deze informatiebladen verschaft. ImPath is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade of financieel verlies die door dit product veroorzaakt worden.

## Gebruiksaanwijzing

### Reagentia voor IHC-procedures

Verdun (20x) wasbuffer door het mengen van 19 delen gedestilleerd water met 1 deel wasbuffer tot de uiteindelijke 1x. Vul de wasbufferfles uit het instrument met de 1x wasbuffer, draai de dop die met de slangen verbonden is vast. Plaats de fles in het aangewezen deel van het instrument.

Haal het reagentiarek met de benodigde RFID gemerkte flacons oplossing uit de koelkast, verwijder de doppen van de flacons en plaats het reagentiarek op de ImPath 36. Zet het apparaat aan, log in, druk op **Creëer labels** om de labels van de objectglaasjes te creëren, plaats de labels op de objectglaasjes, druk op **Laadt objectglaasjes**, plaats de objectglaasjes op de modules, druk op **Scan preparaten**, druk vervolgens op **Scan reagentia** en laat de RFID-lezer de producten identificeren en registreren, controleer de benodigde wasbuffer en afvalcontainer, druk op **Start kleuringsproces**, of druk op **Uitgestelde start** en stel de gewenste eindtijd in, of klik op **Terug naar hoofdscherm** en druk op **Start**. Het kleuringsproces is volledig geautomatiseerd.