

# ImPath TUBING CLEANING KIT



## Disponibilità del prodotto

N. cat. 45702  
Quantità 1 ciclo

## Uso previsto

Uso diagnostico in vitro.

## Descrizione

ImPath Tubing Cleaning kit viene utilizzato per **eliminare i precipitati di DAB o ematossilina** nel tubo di aspirazione dei reagenti (tubo Z1) e per **eliminare i residui di cera** nel tubo di scarico (tubo Z2) del coloratore di vetrini ImPath 36.

## Riepilogo e spiegazione

L'immunoistochimica (IHC) è una tecnica comunemente utilizzata per l'identificazione degli antigeni presenti su tessuti o cellule. È responsabilità dell'operatore individuare le migliori condizioni di lavoro e i migliori reagenti per eseguire il ciclo di colorazione.

## Reagenti forniti

Componente	Quantità per kit
Pulizia tubi 1	1 (uno)
Pulizia tubi 2	1 (uno)

 PathCom Systems, Inc.  
6759 Sierra Ct. Ste# B  
Dublin, CA 94568

Rev: 100212A

## Distribuito da:

A.Menarini Diagnostics S.r.l.  
Via Sette Santi, 3  
50131 Firenze  
Italy

 A.M. Bertolini  
Via Gorizia 50  
23900 Lecco  
Italy



## Diluizione e miscelazione

La soluzione per la pulizia dei tubi è pronta all'uso. Non è necessario eseguire un'ulteriore diluizione.

## Conservazione e stabilità

Conservare a temperatura ambiente. Se conservati in modo adeguato, i reagenti rimangono stabili fino alla data indicata sull'etichetta.

## Avvertenze e precauzioni

Le soluzioni ImPath sono pericolose e irritanti per occhi, apparato respiratorio e cute. In caso di ingestione, possono provocare danni ai polmoni e allo stomaco. **Durante la manipolazione dei reagenti indossare guanti monouso.** Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso il rappresentante locale. Non esistono garanzie espresse o implicite che si estendono oltre la presente scheda tecnica. ImPath non è responsabile per danni a persone o cose, o per perdite economiche provocate da questo prodotto.


## Istruzioni per l'uso

### Frequenza della pulizia dei tubi

Si raccomanda di eseguire la pulizia dei tubi almeno ogni sei mesi o in caso di accumulo di residui di cera nel tubo di scarico.


## Procedure per l'impiego del Tubing Cleaning Kit

1. Caricare il porta reagenti nello strumento.
2. Togliere i tappi e collocare la soluzione Pulizia tubi 1 nella posizione n.1 del porta reagenti e la soluzione Pulizia tubi 2 nella posizione n.5.

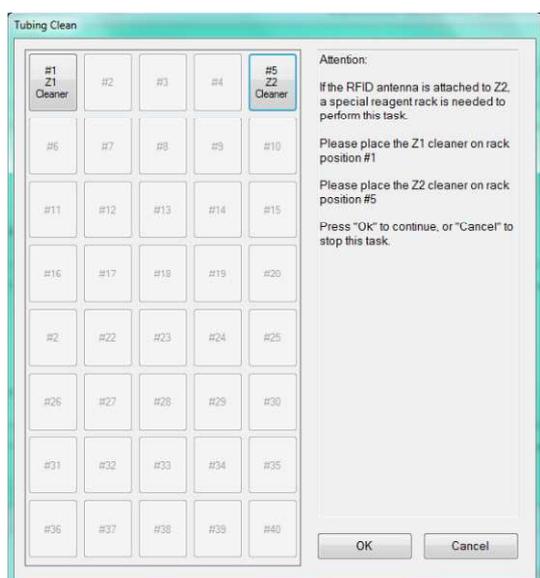


3. Collegare il tubo del **Tampone di lavaggio**. Assicurarsi che il flacone contenga una quantità sufficiente di tampone.
4. Accedere all'interfaccia utente principale. Selezionare **Utilità di sistema>Strumenti** e cliccare su "Pulizia tubi".

# ImPath TUBING CLEANING KIT

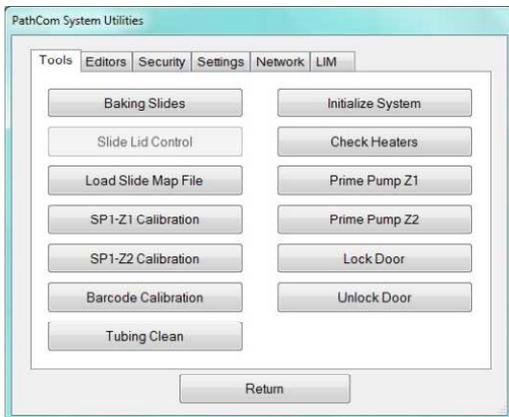

5. Le sonde Z1 e Z2 aspireranno 5 mL di soluzione pulente nei tubi dalle rispettive posizioni nel porta reagenti. Il sistema avvierà un conto alla rovescia di 20 minuti.

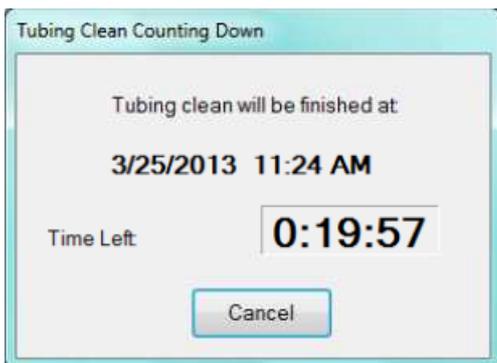

Una volta trascorso questo periodo di tempo, il sistema eseguirà in automatico una procedura di inizializzazione ed eliminerà gli scarti della soluzione pulente. *L'utente può cliccare su "Annulla" in qualsiasi momento per eliminare immediatamente gli scarti dai tubi.* Controllare i tubi. Non devono presentare residui visibili di cera, accumuli di precipitato di DAB o sali. Ripetere la funzione Pulizia tubi in base alle necessità.